


# MANIPULATION 1 (environ 2h30)

## Réaction de Cannizzaro

Cette manipulation permet de lancer la réaction de Cannizzaro et de séparer les produits formés. L'acide benzoïque sera ensuite caractérisé.

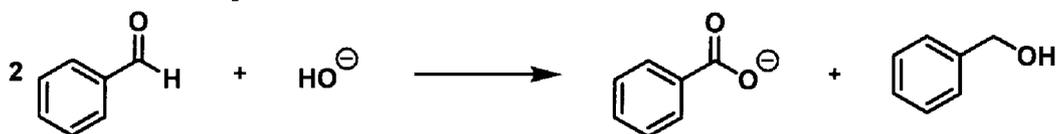

### Techniques à maîtriser à la fin du TP :

Installation d'un montage à reflux en sécurité en utilisant les fixations (**Fiches 2 et 8**)

Peser des réactifs (**Fiche 3**)

Contrôle de l'avancement d'une réaction par CCM (**Fiche 16**)

Extraction (**Fiche 11**)

Séchage de la phase organique et filtration (**Fiche 12**)

Evaporateur rotatif (**Fiche 13**)

Réaliser un spectre IR (**Fiche 21**)

Point de fusion (**Fiche 17**)

Produits	Pictogramme	Sécurité
Acide benzoïque		H315-H318-H372 P260-P280-P305 + P351 + P338 + P310
Alcool benzylique		H302 + H332-H319 P261-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338
Solution d'acide chlorhydrique		H290-H314-H335 P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
Ether diéthylique		H224-H302-H336 P210-P261
Hydroxyde de potassium		H290-H302-H314 P260-P280-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

### Matériel à disposition

- 1 erlenmeyer de 25 mL, 1 de 50 mL et 1 de 100 mL
- Ballon de 25 mL
- Cristalliseur
- Réfrigérant à eau
- Agitateur magnétique chauffant
- Ampoule à décanter de 100 mL
- Filtre papier
- Entonnoir Büchner
- Fiole à vide
- Papier pH
- Réfrigérant
- Cuve à CCM
- Capillaires

### **Mode opératoire :**

- Dans un erlenmeyer de 25 mL plongé dans un bain de glace et posé sur un agitateur magnétique, dissoudre 5 g d'hydroxyde de potassium dans 5 mL d'eau. L'agitation magnétique doit être réglée de façon à éviter les projections.
- ⚠
- Quand la solution est homogène et à température ambiante, elle est versée dans le ballon de 25 mL placé sur l'agitateur magnétique chauffant (bain d'huile ou métallique).
  - Prélever 5 mL de benzaldéhyde à la pipette jaugée, les introduire dans le ballon de 25 mL et adapter le réfrigérant sur le ballon.
  - Le mélange blanchâtre est porté à reflux, sous agitation vigoureuse, pendant 1h30.
    - Pourquoi faut-il plonger l'erlenmeyer dans un bain de glace ?
    - Pourquoi le milieu réactionnel est-il porté au reflux ?
  - L'avancement de la réaction est suivi par CCM dans un système d'éluant éther de pétrole/acétate d'éthyle.
  - Une fois la réaction terminée, le chauffage est coupé.
  - Après l'arrêt du chauffage, on verse 5 à 10 mL d'eau jusqu'à obtention d'une solution homogène.
  - Laisser revenir à température ambiante et extraire avec 4 portions de 15 mL d'ether diéthylique. On prendra soin de conserver la phase aqueuse.
    - Quelles sont les positions relatives des phases aqueuse et organique dans l'ampoule à décanter ? Quelle est leur composition ?
  - La phase organique est séchée par agitation sur sulfate de magnésium anhydre, puis filtrée sur un coton. La solution limpide est recueillie dans le ballon de 100 mL et l'éther diéthylique est évaporé à l'évaporateur rotatif, l'huile restante constitue l'alcool benzylique.
- ⚠
- Pendant ce temps, la phase aqueuse, placée dans l'erlenmeyer de 50 mL est refroidie dans un bain de glace. Celle-ci est acidifiée avec de l'acide chlorhydrique concentré. La réaction est exothermique. Le pH est contrôlé par l'emploi de papier indicateur. A pH = 6, un solide blanc apparaît.
  - Laisser reposer quelques instants, puis filtrer les cristaux blancs sur Büchner. Ces cristaux d'acide benzoïque sont lavés à l'eau froide puis séchés. Quelques cristaux peuvent être récupérés pour réaliser une CCM ainsi qu'une mesure du point de fusion pendant la recristallisation.

L'acide benzoïque est caractérisé par son point de fusion  $T_{\text{fus}} = 122^{\circ}\text{C}$ .